

WILLI GELLER
Creation
SIMPLY BRILLIANT


Creation CC
Ceramica per veneer
Metallo

WILLI GELLER
Creation
SIMPLY BRILLIANT

La perfezione della metallo-ceramica



Le immagini REM mostrano una superficie ceramica scolpita:

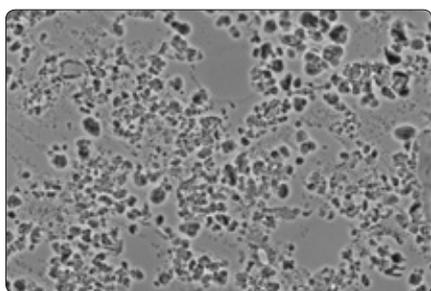

Metallo-ceramica CC rinforzata con leucite

CREATION CC – raffinatezza tecnica – ispirata dalla natura

Migliore che mai, ancora più brillante: perfettamente conforme a requisiti estetici sempre più esigenti, Creation CC è una metallo-ceramica ad alto punto di cottura, che possiede eccezionali caratteristiche ottiche e fisiche, **apprezzate a livello internazionale da oltre 25 anni!**

Le ceramiche perfettamente coordinate presentano un'eccellente omogeneità, garantendo così un'elevata resistenza alla flessione. Il risultato: una microstruttura densamente sinterizzata per **strati puri e non porosi**, sinonimo di massima affidabilità.

Il feldspato di potassio purissimo con struttura microsottile dei cristalli di leucite usato nel sistema Creation CC crea una **rifrazione luminosa iridescente e una brillantezza naturale**, assicurando al contempo una maggiore resistenza. In più con le straordinarie masse per effetti si possono creare ulteriori tonalità pressoché incomparabili.

L'adesivo per ceramica Crea Alloy Bond funge anche da mediatore CET fra metallo e ceramica, per una migliore adesione su metalli non preziosi e una maggiore stabilità cromatica.

Che si usi il kit per principianti, quello di base, Shoulder, Gingiva o Bleach Shade, il Kit 1 oppure il 2, grazie alla struttura modulare della gamma di classici Creation CC è possibile eseguire restauri in metallo-ceramica dotati di una straordinaria estetica e stabilità – **per un vero capolavoro di arte odontoiatrica!**

Creation CC – brillantezza naturale ed efficienza.

I VANTAGGI DI CREATION CC:

- Estetica naturale unica grazie al feldspato di potassio ultra-puro
- Solidità garantita dall'elevata resistenza alla flessione
- Colorazione e dinamismo luminoso naturali grazie ai cristalli di leucite
- Facilità di lavorazione grazie all'eccezionale sistema di colorazione e stratificazione
- Massima affidabilità dal 1988



Tutto in equilibrio



CREA ALLOY BOND – equilibrio CET senza tensioni

Crea Alloy Bond è un innovativo adesivo sviluppato appositamente per neutralizzare le perdite di ossidi metallici, fungendo al contempo da efficiente mediatore CET fra metallo e ceramica.

Forte adesività e semplicità di utilizzo: Crea Alloy Bond è un materiale pronto all'uso, di consistenza pastosa, con forza adesiva pari a ca. **70 MPa**, capace di saldare con sicurezza ceramica e leghe metalliche. Grazie alle sue eccellenti proprietà fisiche, Crea Alloy Bond esercita **un'azione di intercapedine**, prevenendo così il diffondersi di ossidi metallici responsabili delle macchie e formando uno **strato neutro microsottile** fra la lega metallica e la ceramica. In questo modo viene compensata la differenza fra i coefficienti di espansione termica della ceramica e del metallo, con riferimento, in particolare, ai metalli non preziosi. Questo adesivo per ceramica convince anche per l'aspetto: dopo la cottura assume infatti una colorazione giallo-oro, creando uno sfondo esteticamente perfetto **da combinare ad affidabilità cromatica e a un'elevata stabilità!**

Crea Alloy Bond – il mediatore fra metallo e ceramica.



I VANTAGGI DI CREA ALLOY BOND:

- Efficiente intercapedine CET fra ceramica e lega metallica
- Sicurezza garantita grazie a un'elevata resistenza alla flessione (70 MPa)
- Nessuna perdita di colore dei margini grazie alla neutralizzazione degli ossidi metallici responsabili dell'effetto a macchie
- Maggiore affidabilità cromatica grazie allo sfondo giallo-oro
- Compatibile con tutti i materiali dei sistemi Creation CC e LF

Copertura perfetta
del metallo!



CREATION CC CREAPAST – copertura uniforme – uniformemente omogenea

Creation CC Creapast offre all'odontotecnico un moderno opaco in pasta, elaborato appositamente per il comprovato sistema Creation CC.

Convenienza nel consumo, facilità di utilizzo: l'opaco in pasta a grana fine può essere applicato facilmente con un pennello. Questo materiale, **pronto all'uso e sempre omogeneo**, permette di applicare strati particolarmente sottili e uniformi, risultando quindi molto **conveniente in termini di consumo**. Il tutto a una sola condizione: il pennello va leggermente inumidito.

Fatte queste premesse, non resta che personalizzare il lavoro: la gamma Creation CC Creapast comprende 16 sfumature standard, quattro modificatori intensi e tre materiali WOP per leghe ad alto tenore in oro con range di fusione circoscritto – per una maggiore affidabilità cromatica nel restauro finale.

Creation CC Creapast – perché lo sfondo è essenziale!



I VANTAGGI DI CREATION CC CREAPAST:

- Opaco in pasta a grana fine per una superficie omogenea
- Consistenza uniforme – medesime condizioni di lavoro
- Strati di spessore minimo che lasciano maggiore spazio per la stratificazione
- Perfettamente abbinabile agli opachi in polvere
- Utilizzabile per molteplici indicazioni con Creation CC, LF e CP-L&M

Il bianco è di moda

Armonia perfetta
di bianco e rosa



CREATION CC BLEACH SHADES KIT – per una bellezza bianco perla

Lo speciale kit Bleach Shades integra l'ampia versatilità estetica dello spettro Creation CC con sfumature di alta qualità che trascendono la consueta gamma di colori e sono compatibili con qualunque applicazione!

Per rispondere alle ultime tendenze che promuovono colori dentali molto chiari, il sistema Creation CC è stato arricchito con una palette mirata di sfumature bleach che permettono **di creare riflessi accurati fin nei minimi dettagli e adattamenti cromatici perfetti**, anche per i più singolari restauri in ceramica, che **esulano dalla tradizionale gamma di colori** campione.

Composto di dieci elementi, il Kit Creation CC Bleach Shades contiene una pasta ceramica di base, armonizzata ad hoc con le armature metalliche, tre masse dentina, una massa incisale e una massa spalla, più i rispettivi liquidi, tutti ovviamente compatibili con le ceramiche del sistema Creation CC – per soluzioni individuali di straordinaria **brillantezza cromatica**.

Kit Creation CC Bleach Shades – bianco senza compromessi.

I VANTAGGI DEL KIT CREATION CC BLEACH SHADES:

- Eccellente estetica grazie alla dinamica luminosa assolutamente naturale
- Massima accuratezza e fedeltà cromatica grazie all'elevata qualità dei materiali
- Facilità di lavorazione grazie all'eccezionale sistema di colorazione e stratificazione
- Compatibile con tutte le ceramiche Creation CC

KIT CREATION CC GINGIVA – la cornice adatta a un sorriso splendido

Con il nuovo kit Creation CC Gingiva, creare riproduzioni gengivali di naturale bellezza non è mai stato così semplice.

Che si tratti di margini alveolari atrofizzati o di gengive ritratte, con i materiali nei colori gengivali del nuovo e pratico kit Creation Gingiva **è possibile riprodurre in tutta comodità le caratteristiche individuali delle zone di tessuto molle**, garantendo così una transizione praticamente impercettibile fra il dente restaurato e la gengiva.

Otto materiali per infinite possibilità: grazie ai sette colori miscelabili – violetto, rosa scuro, rosa chiaro, rosa fenicottero, rosa, viola e rosa scuro opaco – e alla massa neutra per ottenere gradazioni individuali, è possibile riprodurre non solo punti scarsamente irrorati ma anche ampi fornici vestibolari o piccoli frenuli labiali.

Kit Creation CC Gingiva – per riproduzioni gengivali naturali.

I VANTAGGI DEL KIT CREATION CC GINGIVA:

- Sfumature gengivali di elevata qualità per una perfetta colorazione rosata
- Compatibile con tutte le ceramiche della gamma Creation CC
- Effetto cromatico brillante grazie alla microstruttura non porosa
- Facilità di utilizzo grazie al sistema di stratificazione integrato

Il colpo in più!



MOISTURING FLUID – nessuna asciugatura durante la stratificazione

Umidità duratura per qualunque ceramica: il nuovo Moisturing Fluid di Creation viene applicato su numerosi restauri e cotture correttive complesse come **mezzo umidificatore della pasta ceramica**.

La composizione chimica del fluido umidificante universale è stata impostata in modo tale da poterlo utilizzare per tutti i sistemi ceramici di Creation. Viene utilizzato inoltre come fluido modellante, per prolungare il **tempo di lavorazione di ceramiche** di stratificazione **miscelate**. La pasta già applicata sull'armatura non si asciuga così rapidamente, diventa plastica e può pertanto essere lavorata in modo più mirato – per **aumentare ulteriormente l'efficienza e la precisione** della stratificazione!

Controllare il grado di umidità – modellare più a lungo!

I VANTAGGI DEL MOISTURING FLUID:

- Nessuna asciugatura, le paste ceramiche rimangono modellabili
- Semplice ed efficiente: un Moisturing Fluid per tutte le paste ceramiche!
- Tempo di lavorazione più lungo per paste miscelate – in particolare per lavori importanti
- Applicazione mirata grazie al tenore di umidità regolabile

Dosaggio esatto,
fissaggio perfetto



OVATTA LIQUIDA PER COTTURA – stabilità e sicurezza dimensionale

L'innovativa ovatta liquida per cottura, adatta a tutti i sistemi Creation, fissa con precisione l'oggetto sul vassoio ignifugo. Questo vantaggio dipende dal fatto che lo straordinario materiale liquido di supporto indurisce completamente durante la cottura.

Facile da usare, garantisce un risultato semplicemente stupefacente: la nuova ovatta per cottura si **applica direttamente con la siringa alla corona** o sull'oggetto pressato, che poi viene collocato delicatamente sul supporto del vassoio di cottura.

Nel forno per ceramica, questo speciale materiale indurisce completamente, stabilizzando così in cottura il lavoro dell'odontotecnico e fornendo al contempo un **supporto sicuro e stabile** anche per inlay, onlay, corone e veneer.

Resistente ma comunque **facile da rimuovere**, la pasta solidificata può essere eliminata rapidamente e senza residui dopo la cottura sotto un flusso di acqua corrente e aiutandosi con un utensile.

Ovatta liquida per cottura – il supporto stabile direttamente dalla siringa.



I VANTAGGI DELL'OVATTA LIQUIDA PER COTTURA:

- Presa stabile sul vassoio di cottura
- Facilità di utilizzo grazie al dispensatore intelligente
- Sicurezza garantita dalla stabilità in cottura e dalla perfetta conduzione del calore sull'oggetto
- Convenienza grazie al dosaggio di precisione
- Applicabile in modo universale con tutti i sistemi Creation

WILLI GELLER
Creation
SIMPLY BRILLIANT



Thomas Sing, ZTM

Creation CC

La perfezione della metallo-ceramica



CREATION CC TRANSITION DENTINE – massima trasparenza fin nel profondo

Sviluppata ad hoc per Creation CC e Creation CP, la gamma Transition Dentine propone paste ceramiche con elevato grado di traslucenza, per garantire una transizione armoniosa fra dentina e massa incisale, sia per i restauri dei denti frontali che per quelli laterali.

Estetica profondamente naturale: le paste Transition Dentine complementari sono indicate sia per l'impiego diretto **come strati di dentina per le tecniche di stratificazione standard, sia come strati di transizione fra le tradizionali dentine e paste incisali** o fra i nuclei in dentina pressati e le ceramiche incisali e trasparenti del sistema Creation CP. Anche in caso di veneer, inlay e onlay, questo materiale garantisce un passaggio cromatico armonico fra dente naturale e restauro.

Efficaci e semplici da utilizzare, le Transition Dentine di Creation sono caratterizzate da un'eccellente omogeneità, sinonimo di elevata sicurezza e stabilità cromatica – per un effetto “camaleonte” incredibilmente profondo. Disponibile in una tonalità bleach e 16 colorazioni standard, questa dentina di eccellente qualità è contenuta in flaconi singoli da 20 o 50 grammi in sostituzione del kit paste di base.

Transition Dentine – perché la naturalezza viene dal profondo!


I VANTAGGI DI TRANSITION DENTINE:

- Paste speciali per una gradazione cromatica naturale fra dentina e massa incisale
- Utilizzabile come strato di dentina o nella tecnica di stratificazione standard
- Compatibile con tutte le ceramiche della gamma Creation CC e CP
- Facilità di utilizzo grazie alla maggiore stabilità durante la modellazione
- Effetto di profondità naturale grazie all'elevata traslucenza
- Convenienza grazie al concetto di stratificazione semplificato

Schema di applicazione

Anteriore


Posteriore

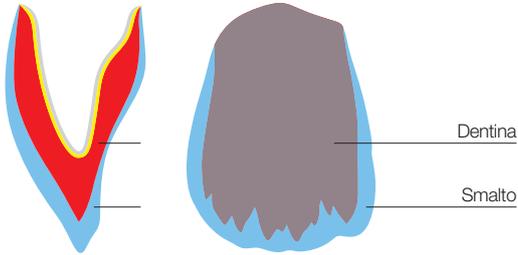

Tecnica di stratificazione

Creation Classic


(Dentine)

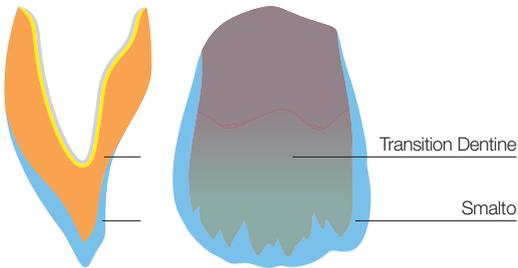

Tecnica di stratificazione

Creation Smart

(Transition Dentine)

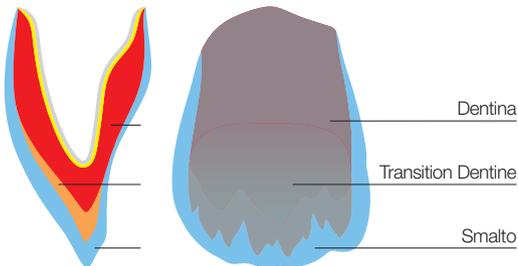


Tecnica di stratificazione

Creation Professional

(Combinazione: Dentina e Transition Dentine)


Applicazione veneer – incisale

Applicazione veneer – labiale

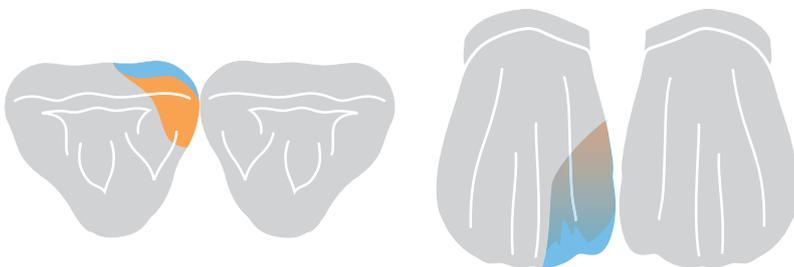

Applicazione inlay

Applicazione onlay

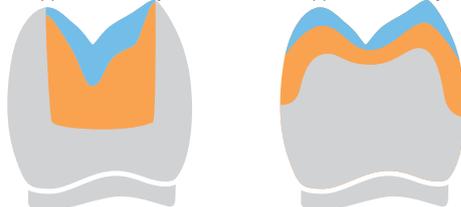

- Dentina
- Transition Dentine
- Smalto

2 in 1 per tutto: più brillantezza grazie agli effetti cromatici personalizzati!



CREACOLOR – colori per pittura e modifier per tutte le paste ceramiche

Il nuovo CreaColor è un **sistema di colori “Two-in-one”** completo per riprodurre in modo semplice ed efficiente accenti cromatici personalizzati **su tutte le superfici e le paste ceramiche**, con tecnica interna o esterna.

Le caratteristiche fisiche dei colori per pittura e dei modifier pregiati sono adattate alle superfici e alle paste ceramiche in modo così perfetto, da consentirne la lavorazione universale con tutte le ceramiche di stratificazione e le pressoceramiche, nuclei in dentina pressati o cotti, così come con armature in ossido di zirconio – perché **la creatività con i colori non deve avere confini!** Le nuove paste sono a grana estremamente fine, fluorescenti e mescolabili a piacere tra loro.

Brillantezza dei colori in due varianti: il nuovo sistema CreaColor è stato sviluppato in collaborazione con Sascha Hein (Oral Designer, Perth, Australia) sulla base dei colori per pittura **Creation Make up Neo** e dei modificatori **In Nova Neo**, che riscuotono successi da anni. Il sistema CreaColor è costituito da due componenti:

- CreaColor Make up Neo
- CreaColor In Nova Neo

I VANTAGGI DI CREACOLOR:

- **Massima brillantezza cromatica per la colorazione interna ed esterna**
- **Versatilità ed efficienza: un sistema per tutte le paste ceramiche!**
- **Alta precisione e fedeltà dei colori grazie a materiali di qualità**
- **Effetto naturale dei colori grazie ad altissimi valori di fluorescenza**
- **Semplice gestione: mescolabili e correggibili tra loro**

MAKE UP NEO – intenso nel carattere cromatico, efficiente nel consumo

Miscela, colorazione e correzione perfette: l'assortimento universalmente utilizzabile di colori Make up Neo del nuovo sistema CreaColor è un **“cofanetto make-up per ceramica” ideale** per colorazione interna ed esterna, ma anche per la miscela di paste per ceramica di stratificazione e per la caratterizzazione del diossido di zirconio.

I 17 colori sono disponibili **sotto forma di pasta pronta per l'uso** e mostrano una consistenza molto uniforme e un finissimo grado di colorazione – per un'applicazione a strati sottili e una superficie ceramica omogenea.

Accenti di colore – naturalmente belli e semplici: le 13 vernici ceramiche pastose dispongono di un'elevatissima **fluorescenza e intensità cromatica**, mentre le quattro vernici per dentina sono estremamente coprenti e ideali per correzioni cromatiche e verniciature della pressoceramica. E non è tutto: con i tre colori a effetto, si possono creare **nuance molto espressive**, per il massimo della personalizzazione!

Contenuto:

- 13 colori (da MN-F1 a MN-F13) – fluorescenti e lucidanti
- 4 colori (da MN-FA a MN-FD) – colore della dentina nei quattro gruppi di colori Vita® per correzioni cromatiche e per la verniciatura di lingotti di pressatura
- 1 glasura fluorescente (GL-F)
- 1 fluido per colori
- 1 reconditioner per colori (per rinfrescare colori addensati)

Indicazioni:

- Pittura interna di masse dentina pressate o sottoposte a cottura
- Pittura esterna di tutte le pressoceramiche
- Pittura esterna di tutte le ceramiche di stratificazione
- Da aggiungere alla miscela per intensificare o personalizzare la ceramica di stratificazione
- Caratterizzazione del diossido di zirconio (con l'aiuto di Frame Shade FS NT)

Make up Neo: universale e individuale, fin nei minimi dettagli!

Sicuro, affidabile e bello!

I vantaggi delle leghe
per sovracottura



IN NOVA NEO – dinamismo luminoso e fluorescenza naturalmente colorati

Colori forti per miscelazione e colorazione: CreaColor In Nova Neo è un moderno modificatore universale, applicabile a tutte le linee ceramiche e dotato di caratteristiche fisiche adattate che consentono la **modificazione universale di tutte le paste ceramiche**.

Con i dieci modificatori di ceramica a colore intenso è possibile realizzare **naturali effetti di fluorescenza**, supportando in modo efficace la resa armonica dei colori, senza alcuna riduzione del valore di luminosità. Incredibilmente **versatili e convenienti** a livello di applicazione, gli esclusivi modificatori sono pensati per colorare paste ceramiche e non sono quindi indicati per le superfici ceramiche! Al contempo, vengono impiegati per verniciare l'armatura in ossido di zirconio e **riprodurre così la colorazione dei denti, oltre che per la caratterizzazione** della superficie in ossido di zirconio bianca o pre-colorata.

Interessanti aggiunte di colori nell'assortimento: **Crackliner** per la compensazione di lacerazioni tridimensionali e **Illusion** per la simulazione di un'azione penetrante o per la riduzione del valore di luminosità

Contenuto:

- 10 modifier – per la colorazione di tutte le paste in ceramica di stratificazione
- 2 colori a effetto (Crackliner e Illusion) – per accenti personalizzati

Indicazioni:

- Miscelazione per intensificare e personalizzare la ceramica di stratificazione
- Pittura di armature in ossido di zirconio per riprodurre la colorazione dei denti e caratterizzare superfici in ossido di zirconio bianche o già colorate
- Imitazione di azione penetrante e compensazione di crepe tridimensionali

La macchiolina di colore per armatura e ceramica!



CREATION LF – basso punto di fusione ma eccellente qualità

Versatilità ed efficienza: il sistema di ceramiche Creation LF è particolarmente indicato per realizzare veneer su tutte le biogelhe e leghe auree fuse nelle tecniche CET convenzionali. Perfetto anche come materiale stratificato per le moderne pressoceramiche Creation (Creation CP, CP-L&M e Creation Press & Paint on Metal), questa metallo-ceramica a basso punto di fusione vanta un'incredibile versatilità di applicazione – per un **ulteriore valore aggiunto in laboratorio**.

E non è tutto: queste paste ceramiche dalle eccezionali caratteristiche di lavorazione, sono ideali anche come materiale di riempimento per il sistema Creation CC.


Creation LF convince non solo per la flessibilità di impiego nelle più svariate indicazioni, ma anche per **la sua brillantezza incredibilmente naturale**. La gamma è magistralmente completata dalle eccezionali tonalità della dei colori per pittura e dei modificatori CreaColor.

Creation LF – ancora più creatività nella metallo-ceramica LF.


I VANTAGGI DI CREATION LF:

- **Bassa temperatura di fusione (770 °C) per ceramica su leghe per sovracottura gialle**
- **Sicurezza garantita dall'elevata resistenza alla flessione**
- **Reazione naturale all'abrasione**
- **Lavorazione efficiente grazie alla facilità di fresatura e lucidatura**
- **Maggiore brillantezza grazie agli effetti cromatici individuali del sistema CreaColor**


CREATION CC - ASSORTIMENTO

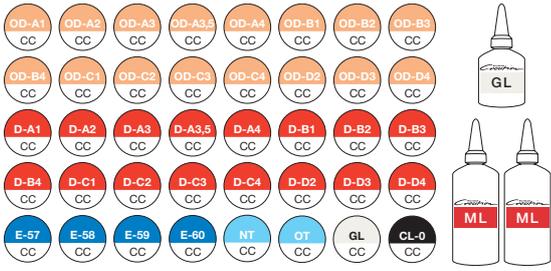


CC Kit 1 | 000804
Kit masse base (dentina, massa incisale)

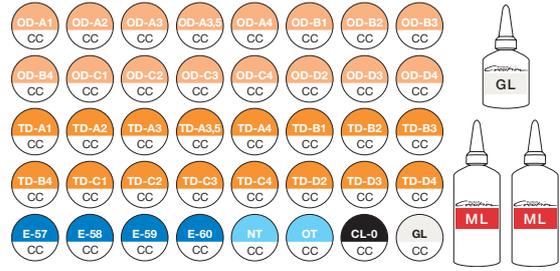


CC Transition Dentine Kit | 000801
Kit masse base (Transition Dentine, massa incisale)

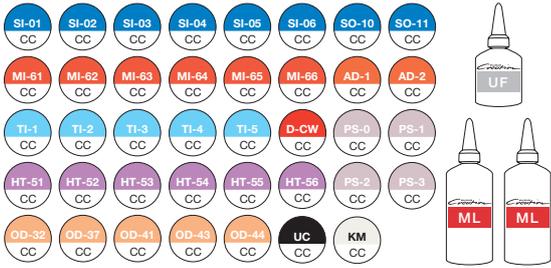


CC Kit 2 | 001508
Kit masse per effetti

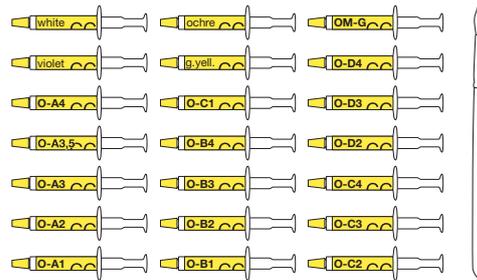


CC Creapast Kit | 000300
Opaco in pasta completo con modificatori

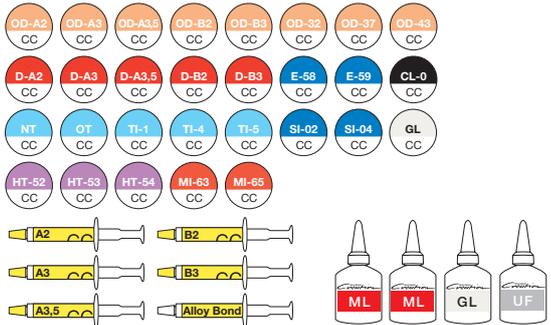


CC Starter Kit | 000915
Kit principianti con i principali colori dentali

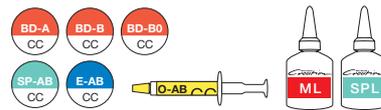


CC Bleach Shades Kit | 000250 - Gamma completa di colori bleach

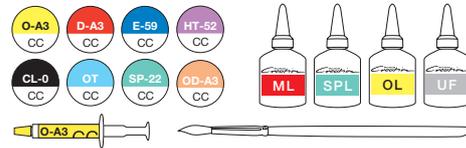

CC Primus Kit | 000051 - Kit di prova per un colore dentale a scelta

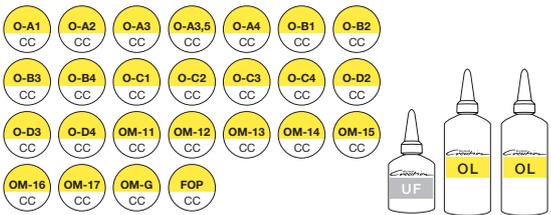

CC Opaque Kit | 000800
Opaco in polvere completo con modificatori

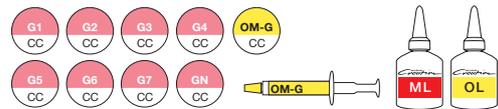

CC Gingiva Kit | 001590 - Masse nei colori gengivali




CC Shoulder Kit | 001503 - Massa spalla completa

CREACOLOR - ASSORTIMENTO



CreaColor Kit | 001200
2 in 1 per tutto: più brillantezza grazie agli effetti cromatici personalizzati

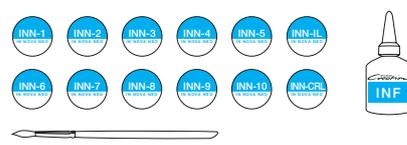

CREATION CC COLOR CHART

A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
OPAQUE DENTINE															
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
DENTINE															
TD-A1	TD-A2	TD-A3	TD-3,5	TD-A4	TD-B1	TD-B2	TD-B3	TD-B4	TD-C1	TD-C2	TD-C3	TD-C4	TD-D2	TD-D3	TD-D4
TRANSITION DENTINE															
57	58	59	60		CL-O clear	UC window		NT neutral	OT opal	TI-01 blue	TI-02 white	TI-03 pink	TI-04 yellow	TI-05 grey	
ENAMEL				CLEAR				TRANSPA							
SI-01 light yellow	SI-02 medium yellow	SI-03 heavy yellow	SI-04 light orange	SI-05 medium orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange		PS-0 white	PS-1 blue/w.	PS-2 flamingo	PS-3 orange			
EFFECT ENAMEL								PEARL ENAMEL							
HT-51 iridescent	HT-52 khaki	HT-53 sand	HT-54 honey	HT-55 borde.	HT-56 ocher	SP-21 neutral	SP-22 flamingo	SP-23 sand	SP-24 gold	SP-25 red brown	SP-26 yellow gold	SP-27 ivory	SP-28 opaque yellow	SP-29 honey	SP-G gingival
NECK TRANSPA HIGH FLUORESCENT						SHOULDER POWDERS HIGH FLUORESCENT									
MI-61 ivory	MI-62 lemon	MI-63 honey yellow	MI-64 flamingo	MI-65 gold	MI-66 olive		AD-1 light yellow	AD-2 orange							
MAKE IN HIGH FLUORESCENT INTERNAL POWDER							APPROXIMAL DENTINE								
G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	G-N neutral		OD-32 havanna	OD-37 curry	OD-41 orange	OD-43 ivory	OD-44 cuba		
GINGIVAL								OPAQUE DENTINE							
O-AB		BD-A	BD-B	BD-BO		TD-BA		S-AB		SP-AB		KM			
BLEACH OPAQUE		BLEACH DENTINE			TRANSITION D			BLEACH EN.		BLEACH SHOULDER		CORRECTION POWDER			

CREACOLOR COLOR CHART

	MUN-F1 white	MUN-F2 eggshell	MUN-F3 lem. yellow	MUN-F4 mandarine	MUN-F5 flamingo	MUN-F6 apricot	MUN-F7 light brown	MUN-F8 med. brown	MUN-F9 olive	MUN-F10 red		
MAKE UP NEO ▶												
	MUN-F11 blue	MUN-F12 grey	MUN-F13 deep blue	MUN-FA stain A	MUN-FB stain B	MUN-FC stain C	MUN-FD stain D	MUN-GL-F Glaze				
IN NOVA NEO ▼												
	INN-1 melon	INN-2 rose	INN-3 yellow	INN-4 r. brown	INN-5 brown	INN-6 olive	INN-7 grey	INN-8 blue	INN-9 white	INN-10 mais	INN-CRL Crackliner	INN-IL Illusion

WILLIGELLER
Creation
SIMPLY BRILLIANT

WILLI GELLER
Creation
 SIMPLY BRILLIANT

Creation CC – Caratteristiche fisiche			
Caratteristica	Unità di misura	Valore	Norma
Cottura della dentina	°C	920	-
Resistenza alla flessione	MPa (Nmm ²)	84	Min. 50
CET	10 ⁻⁶ ×K ⁻¹	13.3 ± 0,3	-
Temperatura di vetrificazione	°C	580 ± 10	-

Creation LF – Caratteristiche fisiche			
Caratteristica	Unità di misura	Valore	Norma
Cottura della dentina	°C	770	-
Resistenza alla flessione	MPa (Nmm ²)	80	Min. 50
CET	10 ⁻⁶ ×K ⁻¹	11,4 ± 0,3	-
Temperatura di vetrificazione	°C	510 ± 10	-

Distributore
 Creation Willi Geller International GmbH
 Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria
 Tel. +43 (0)5522 76784, Fax +43 (0)5522 76784-59
 info@creation-willigeller.com, www.creation-willigeller.com

Fabbricante
 KLEMA Dentalprodukte GmbH
 Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria  0483

CONTATTO



Cendres+Métaux Italia S.r.l.
 Via D. Balestrieri 1, 20154 Milano
 Phone ++39 02 33 61 15 10, Fax ++39 02 33 60 01 11
 info@cndental.it, www.cmsa.ch