

WILLI GELLER
Creation
SIMPLY BRILLIANT

Creopal Prothèses dentaires



Ligne dentaire composite exclusive : jeu de couleurs et de formes à facettes multiples

Esthétique de haute volée, stabilité et efficacité : Creopal est un système moderne de dents composites à valeurs de stabilité accrues, développé dans un échange interculturel de prothésistes dentaires asiatiques et européens. Ainsi, la gnathologie et la texture de surface des dents antérieures ont été conçus dans un projet de plusieurs années du maître de la céramique Willi Geller, alors que les dents postérieures ont été développées en parallèle par, entre autres, Yasuhiro Odanaka.

Les dix formes de dents antérieures et les cinq formes de dents postérieures pour les mâchoires supérieure et inférieure sont parfaitement harmonisées entre elles. Elles se distinguent essentiellement par leur morphologie et leur texture de surface naturelles ainsi que par une brillance exceptionnelle. En raison de son contenu de remplissage équilibré, ces dents en matière plastique à haute densité se caractérisent par une excellente résistance à l'abrasion et à la flexion.

Épaisseur de couche minimale, expression maximale

À la gamme de prothèses dentaires exclusive viennent également encore s'ajouter les facettes composites multifonctionnelles pour les zones antérieure et postérieure. Malgré leur


épaisseur de couche extrêmement fine, ces « Creopal-Shells » réalisent le même effet de couleur et le même niveau de luminosité que les dents entièrement anatomiques : une maîtrise parfaite du naturel.

Adaptables individuellement et indications multiples :

pour une adaptation optimale des couleurs avec des matériaux plastiques et céramiques, le système Creopal est disponible en 16 couleurs de dents Vita® et deux teintes de blanchiment, les Creopal-Shells existent en une palette de couleurs réduite. Les prothèses dentaires fabriquées par le procédé à quatre couches et les Creopal-Shells (procédé à deux couches) conviennent à la fois pour des prothèses partielles et combinées, pour des implants ainsi que pour des prothèses totales et comme montage ou maquette pour des essais esthétiques et le « backward planning ». Les formes des dents légèrement rectangulaires se laissent individualiser et combiner de manière idéale sans porter le moindre préjudice à l'esthétique.

Les dents et Shells Creopal : économiques et esthétiques jusque dans les moindres détails !

WILLI GELLER
Creopal – Pour vous faciliter les travaux et rendre les patients plus heureux ...

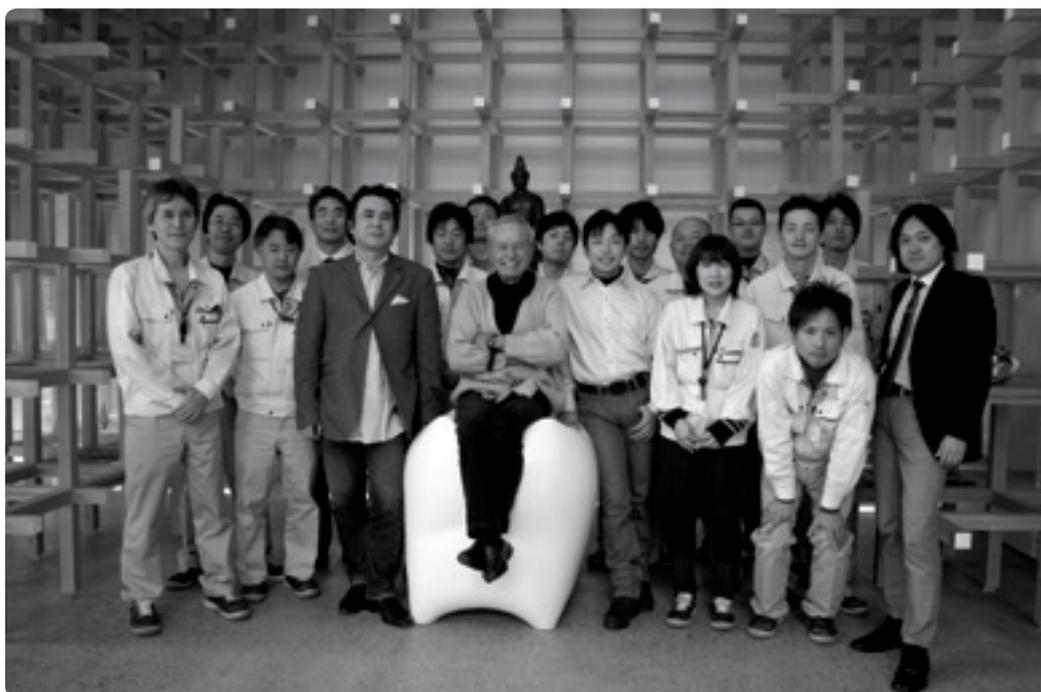

... une équipe asiatique et européenne a créé la combinaison parfaite de prothèses dentaires et de Shelle/incrustations vestibulaires en utilisant des matériaux de haute technologie les plus modernes : acrylique et matériaux composites de liaison.

Ce système est unique au monde et porte son titre »THE ONE « à bon escient.



Enjoy »THE ONE «

WILLI GELLER
Creopal SHELL | FULLCONTOUR



LES POINTS DE BRILLANCE DE CREOPAL ET DE CREOPAL-SHELL :

- Prothèses dentaires et incrustations vestibulaires naturelles et indépendante d'un système
- Formes de dents avec opalescence et fluorescence accrues pour une dynamique lumineuse supérieure
- Les formes de base rectangulaires peuvent facilement être individualisées et sans perte de couleur
- Espaces interdentaires fermés pour un montage naturel et une conformation naturelle des papilles
- Forme, couleur et luminosité identiques pour dents et facettes à plusieurs couches
- Indications universelles dans la technique prothétique partielle et totale ainsi que pour les traitements temporaires

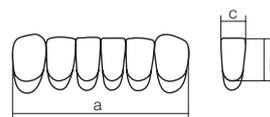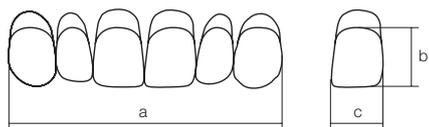

Type AU

Dents frontales de la mâchoire supérieure

Type AL

Dents frontales de la mâchoire inférieure


• Creopal – shell

• Creopal – full contour



07
PU-PL

a 28,0
b 29,0
c 9,9
d 9,3

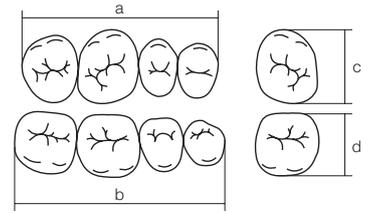

Comportement de contact en position statique

Intercuspitation plane

Calotte : 140

Grâce à la forme anatomique et à la pente coronaire, l'utilisation de la technique combinée et de l'ouvrage de prothèse total est possible sans problème.



10
PU-PL

a 30,0
b 31,1
c 10,6
d 10,0
a 30,0
b 31,1
c 10,6
d 10,0




13
PU-PL

a 32,0
b 33,2
c 11,3
d 10,7
a 32,0
b 33,2
c 11,3
d 10,7



16
PU-PL

a 34,0
b 35,3
c 12,1
d 11,3
a 34,0
b 35,3
c 12,1
d 11,3

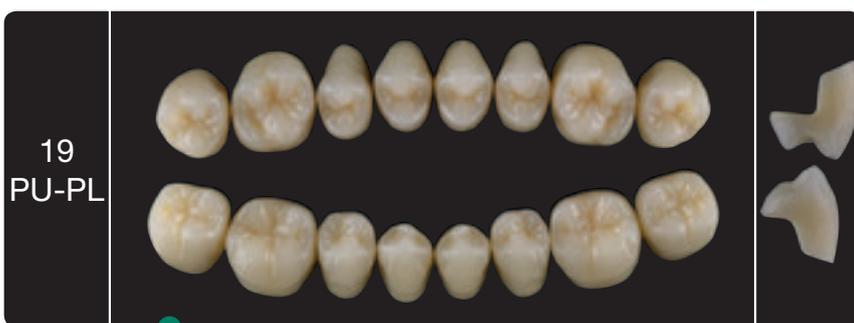

19
PU-PL

a 36,5
b 39,4
c 12,2
d 12,1

CREOPAL: SHELL ET CONTOUR PLEIN

shell anterior	X	X	X	X	-		X	X	X	-		-	-	-	-		-	-	-	-	X
shell posterior	X	X	X	X	-		X	X	X	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
full anterior	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
full posterior	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	-	-



Avantages de Creopal et Creopal-Shell :

- La technique à quatre couches permet la fabrication d'une dent prothétique naturelle
- La technique à deux couches avec opacité accrue garantit une apparence naturelle des facettes composites
- Profondeur de couleur dynamique en raison des noyaux de dentine hautement chromatiques avec des structures de mamelons à conformation individuelle et des zones incisives opalescentes
- Zones incisives à opalescence accrue pour une caractérisation sans perte de couleur
- Les espaces interdentaires permettent un montage individuel et facilitent la conformation naturelle des gencives
- Conductibilité brillante des couleurs grâce à une opalescence, une fluorescence et une translucidité naturelles
- La morphologie de surface spéciale permet une réfraction naturelle
- Esthétique de haute volée grâce aux formes expressives ; assortiment de formes réduit, extensible par individualisation (faibles stocks en magasin !)
- Stabilité élevée de liaison au matériau de base de la prothèse
- Aucun dépôt de plaque grâce à une surface homogène
- Aucune usure des antagonistes naturels

Principes de montage :

- Pour tous les concepts de montage courants selon les lois de modelage des dents / articulations
- Montage suivant la relation de dent sur dent ou de dent sur deux dents
- Occlusion équilibrée

Indications pour Creopal et Creopal-Shell :

Planning et prothèses provisoires

- Montage pour le « backward planning » dans le cas de restaurations complexes
- Maquette pour prothèses provisoires de courte durée
- Prothèses provisoires de longue durée (couronnes individuelles et bridges)
- Couronnes Jacket

Technique combinée

- Travaux télescopiques
- Traitements mandibulaires
- Travaux d'implantation
- Prothèses partielles

Technique prothétique totale

WILLI GELLER
Creation
SIMPLY BRILLIANT

Distributeur

Creation Willi Geller International GmbH
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Autriche
Tél. +43 (0)5522 76784, Fax +43 (0)5522 76784-59
info@creation-willigeller.com, www.creation-willigeller.com

Fabricant

KLEMA Dentalprodukte GmbH
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Autriche

